



Buzzy®

« DRUG FREE PAIN RELIEF »

Buzzy® Personal er et personligt forbrugerprodukt beregnet til brug af én bruger eller i hjemmeplejemiljøer af en ikke-faglig operatør.

Model

Buzzy Personal Striped

REF

BKT1

GTIN

00856921003411

Buzzy Personal Black

BKT2

00856921003473

Buzzy Personal LadyBuzz

BKT3

00856921003459

MMJ Labs, LLC dba Pain Care Labs



195 Arizona Ave NE LW08 • Atlanta, GA 30307, U.S.A.

PainCareLabs.com • Info@PainCareLabs.com

877.805.2899

Buzzy® Personal


Brugsanvisning (IFU-002 Rev 04)

03.03.2026

PainCareLabs.com



Brugsanvisning:

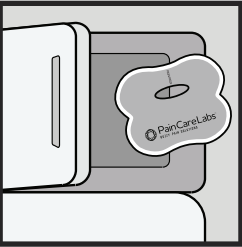

Placer isoserne ("vinger") i fryseren.

Opbevar isoserne i en fryser i ca. én time, indtil de er frosne. Tag dem ud lige inden brug. Isoserne forbliver frosne i ca. 15 minutter ved stuetemperatur og 5 minutter mod huden. (Frys ikke vibrationsenheden). Vingerne sidder vandret under silikonebåndet.

Vigtigt: Placer IKKE hul/vinger lodret, da båndet kan knække.

LBuzzy® Personal-isoser har en klar side til mere intens kulde og en mindre intens hvid side til kuldefølsomme brugere. Isoser indeholder ikke ethylenglykol ("frostvæske"). Gelen i isen kan nedbrydes, hvis den ikke opbevares korrekt, og vil dehydrere over tid eller i tørre klimaer. For bedste effekt skal isoserne være frosne helt igennem for at transmittere vibration ved den effektive frekvens og styrke. (Ikke-frosne poser eller geler vil absorbere den specifikke frekvens, der er nødvendig for smertelindring.)

Bemærk:

Til transport, placer mellem to kommercielle koldepakker eller i Cold2Go-taske (sælges separat) for at opretholde frosttemperaturen.

Tilbehør sælges separat:

Cold2Go isolerede tasker til transport, DistrACTION®-kort, præmiemærkater og mere.

Vil du have mere information?

Yderligere vejledninger, placering, videoer og andre downloads er tilgængelige på **bzy.fyi**





CS Lifesciences Europe Limited

The Black Church, St. Mary's Place

Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

EU REP

CE

Type B Applikationsdel

Miljøbetingelser:

Transport og opbevaring mellem anvendelser: -25 til 70 °C. 0-95 % RF. 700-1060 hPa.

Driftsbetingelser:

5-40 °C. 15-95 % RF. 700-1060 hPa. 2000 m højde.

Buzzy® Personal Indhold:

Buzzy® Personal-sæt inkluderer en M-Stim® motorenhed (holdbar terapeutisk vibrationsmotorenhed) med vippeomskifter til manuel afbrydelse (2 AAA-batterier installeret), to isoser, én handsfree-strop og brugsanvisning. Alle tilbehørsdele er latexfrie og genanvendelige. Isoser og stropper er personlige forbrugerprodukter beregnet til brug af én bruger.

Garanti:

Hvis du ikke er helt tilfreds, kan du returnere produktet inden for 30 dage til indkøbsstedet for fuld refusion, eller kontakt os på Support@PainCareLabs.com. For yderligere oplysninger om returprocessen, besøg PainCareLabs.com/Warranty-and>Returns/


 Advarsler:

Kun til tilsigtet brug.


Direkte eller langvarig påføring af is kan medføre vasokonstriktion.

Garanti:

Virksomheden dækker enhver form for fejl eller defekt, der kan opstå eller fremkomme ved normal brug af motorenheden i produktet i 6 måneder eller 3 batteriudskiftninger, alt efter hvad der indtræffer først. Garantien for blødgods og isoser varer 1 år fra købsdatoen. Virksomheden vil erstatte dit produkt eller refundere dit køb og forbeholder sig ret til at opgradere eller erstatte dele med de nyeste produktversioner. Buzzy Personal-enheder har et silikonebånd til bekvem fastgørelse af vingerne. Brud på båndet som følge af brug af ikke-Buzzy-mærke isoser, forkert isposeorientering, grov håndtering eller misbrug af produktet er ikke dækket af garantien. Enheder med tomme batterier og/eller returnerede enheder, der fungerer ved inspektion, udgør ikke en fejl og er ikke dækket af garantien. Enheder med afsmurfte skruer er ikke dækket af garantien. Returnerede enheder, der ikke er dækket af garantien, kan returneres på kundens bekostning. Sundhedssystemer, der køber Buzzy Personal-sæt til klinisk brug, annullerer enhver garanti for institutionen. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.

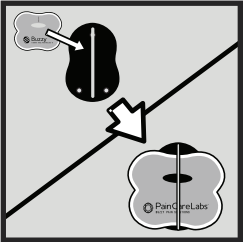

Fastgør vinger til bagsiden af Buzzy® Personal.

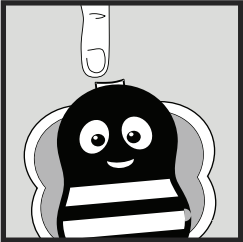

Sæt kontakten på ON for at aktivere.

ON

OFF

Symboler og ikoner:

 Enkelt patient – Flergangsbrug

 Holdes væk fra sollys

 Hold tørt

 Øvre og nedre temperaturgrænser

 Øvre og nedre fugtighedsgrænser

 Øvre og nedre trykgrænser

 Europæisk overensstemmelse (CE)

 Fjernelse af batteri inden bortskaffelse

 Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

 Se brugsanvisningen inden brug

 Oversættelser

 Advarsel

 Producent

 Fremstillingsland

 Fremstillingsdato

 Lotnummer

 Unik enhedsidentifikator

 Medicinsk udstyr

 Europæisk unions-repræsentant

 Overholder FCC-standarder

 Type B applikationsdel

  Bortskaffelse af batterier:

Fjern batterierne inden bortskaffelse af enheden. Bortskaf batterier separat fra husholdningsaffald i overensstemmelse med lokale genbrugs- og miljøregler for alkaline (LR03) batterier. Følg WEEE-retningslinjerne (Waste Electrical and Electronic Equipment) ved bortskaffelse af enheden. Batterier og enheden må ikke brændes.

 Batterisikkerhed:

Bug kun AAA alkaline (LR03) batterier.

Genoplad ikke ikke-genopladelige batterier.

Kortslut, knus, punktér, adskil ikke batterier, og udsæt dem ikke for varme, ild eller vand.

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis de sluges.

Sæt batterirumsdækslet sikkert på igen inden næste brug.

Indikationer for Brug:

Buzzy® er beregnet til at kontrollere smerter forbundet med nåleprocedurer (f.eks. injektioner, vaskulær adgang, kanyletning, blodprøvetagning, bloddonation, dialyse, kosmetiske og tandlægeinjektioner) og til midlertidig lindring af mindre skader (muskel- eller senesmerter, splinter og bistik). Brug med isoser er godkendt for aldersgruppen 1 år og opefter.

 Kontraindikationer:

Må ikke anvendes ved uforklaret smerter i læggen. Kontakt en læge. • Denne enhed må ikke anvendes over hævede eller betændte områder eller hudlæsioner. • Må ikke placeres direkte på et termisk forbrænding. • Brug ikke isposen ved underliggende følsomhed over for is eller kulde (f.eks. seglcelleanæmi, Raynauds sygdom).

 Forholdsregler:

Opbevar isoser på et køligt, tørt sted. • Isoserne skal være frosne helt igennem for bedste effekt. • Brug ikke tør is til at fryse isoser med mindre under overvågning af en sundhedsprofessionel. • Punktér ikke isposekamrene. • Kassér hvis der er lækage. • Indtagelse af gel er forbudt. • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. • Må ikke bruges ved neuropati eller overfølsomhed over for is.

Fejlfinding:

Ved intensiv brug eller ekstreme temperaturudsving kan det være nødvendigt at udskifte batterier hyppigere. Hvis enheden holder op med at virke eller har svag mekanisk stimulation, udskiftes batterierne. Placer nye batterier i den korrekte polaritet (+/-) som vist i enheden.


Vedligeholdelse:

Kontroller hele enheden for synlige tegn på skader såsom revner. Sørg for, at kontakten bevæger sig frit. Sørg for, at de udvendige skruer er sikrede. Tør forsigtigt alle eksponerede overflader af med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. For at desinficere, tør alle eksponerede overflader af med alkohol eller en hospitalsklasse desinfektionswipe. Klorhexidin kan nedbryde plastik over tid. PDI Sani-Cloth Detergent Wipes (dem med det gule låg) anbefales. Det er ideelt at lade enheden lufttørre inden brug. Den klare side af vingerne kan også tørres af med en alkohol-wipe eller vatpind. Lad lufttørre. Autoklaver eller nedsæk ikke. Denne enhed kræver ikke sterilisering til brug.

Buzzy® Placering:



Til injektioner

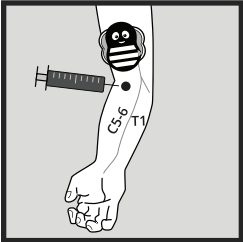

Til IV eller phlebotomi

Buzzy® Personal kontrollerer smerte ved kontakt:

Placer direkte på skaden eller "mellem hjernen og smerten" ved nåleprocedurer.

Til injektioner:

Til intramuskulære deltoidinjektioner trykkes mod aksilla (mellem skulder og armhule) med prikken orienteret mod skulderen. Til andre injektioner placeres Buzzy® direkte på injektionsstedet i 30-60 sekunder. Flyt Buzzy® mod hoved eller rygsøjle (proximalt). Injicér med prikken nær injektionsstedet.

Til IV eller phlebotomi:

Aktiver vibrationsvippeomskifteren. Hold, fastgør med stroppen, eller stik Buzzy Personal under tourniquetten 2-3 cm over (proximalt til) adgangsstedet. Placer ikke direkte på stedet. Rengør stedet og skaff adgang uden forsinkelse. Valgfrit: Før tourniquetten gennem slottet på Buzzy® Personal for at fastgøre Buzzy® Personal til armen.

Returnering af enhed:

Køber skal kontakte kundeservice eller den autoriserede distributør i det land, hvor enheden blev købt, for returneringsinstruktioner.

Sådan bestiller du / Yderligere information:

Besøg venligst vores hjemmeside PainCareLabs.com for en komplet liste over ofte stillede spørgsmål, andre smertebehandlingstips, instruktionsvideoer, tilbehør og reservedele.

 SERVICÉR IKKE UNDER BRUG

US Patent • Britisk patent nr. 2455695
RM-1910, 1248-064-5002-00, 1248-064-5001-00

 Hvis du observerer lækage, korrosion eller lugt fra batterierne:

1. Rør ikke ved lækket materiale med bare hænder.

2. Brug beskyttelseshandsker og tør rummet af med en tør klud.

3. Bortskaf batterier straks i henhold til lokale krav.

4. Hvis lækket materiale kommer i kontakt med hud eller øjne, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp, hvis irriterationen fortsætter.

 Kontrollér for skader, inden der indsættes nye batterier. Hvis korrosion fortsætter, eller enheden fejlfungerer, stop brugen og kontakt kundeservice.

