



Buzzy®

« DRUG FREE PAIN RELIEF »

Buzzy® Personal on isiklik tarbekaup, mis on mõeldud kasutamiseks ühele kasutajale või kodushoolduskeskkondades mitteprofessionaalne kasutajale.

Mudel

Buzzy Personal Striped

Buzzy Personal Black

Buzzy Personal LadyBuzz

REF

BKT1

BKT2

BKT3

GTIN

00856921003411

00856921003473

00856921003459

MMJ Labs, LLC dba Pain Care Labs

195 Arizona Ave NE LW08 • Atlanta, GA 30307, U.S.A.

PainCareLabs.com • Info@PainCareLabs.com

877.805.2899

Buzzy® Personal Kasutusjuhend

IFU-002 Rev 04

03.03.2026

PainCareLabs.com

PainCareLabs®

Kasutusjuhend:

Asetage jahutuspakid („tiivad“) sügavkülma.
Hoidke jahutuspakke sügavkülmikus ligikaudu üks tund, kuni need on tahkelt külmunud. Eemaldage vahetult enne kasutamist. Jahutuspakid jäävad külmunuks toatemperatuuril ligikaudu 15 minutit ja naha vastas ligikaudu 5 minutit. (Ärge külmutage vibratsiooniüksust.) Tiivad sobivad silikoonrihma alla horisontaalselt. **Ärge asetage aava/tiibu vertikaalselt, kuna rihtm võib katkeda.**
Buzzy® Personali jahutuspakidel on läbipaistev pool intensiivsema külma jaoks ja vähem intensiivne valge pool külmatundlikele

kasutajatele. Jahutuspakid ei sisalda etüleenlühikooli („antifriisi“). Jää sees olev geel võib halveneda, kui seda ei hoita korrektselt, ja dehüdreerub aja jooksul või kuivades oludes. Parima toime saavutamiseks peavad jahutuspakid olema tahkelt külmunud, et edastada vibratsioon tõhusal sagedusel ja tugevusel. (Külmutamata pakid või geelid imavad valu leevendamiseks vajaliku konkreetse sageduse endasse.)
Märkus: Transportimiseks asetage kahe kommertskülmapaki vahele või Cold2Go kotti (müüakse eraldi), et säilitada külmutustemperatuur.
Eraldi müüdavad tarvikud: Cold2Go isoleeritud transpordikotid, DistrACTION®-i kaardid, auhinnakleebised ja palju muud.

Soovite rohkem teavet?

Lisateavet, paigutust, videoid ja muid allalaadimisi leiate aadressilt **bzy.fyi**



PHYSICIAN INVENTED



EU REP

CE

CS Lifesciences Europe Limited

The Black Church, St. Mary's Place

Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Keskonnatingimused:

Transport ja ladustamine kasutuste vahel: –25 kuni 70 °C. 0–95% suhteline niiskus. 700–1060 hPa.

Kasutustingimused:

5–40 °C. 15–95% suhteline niiskus. 700–1060 hPa. 2000 m kõrgus.

B-tüüpi rakendatav osa.

Patareid:

See seade töötab kahe (2) AAA-leelispatareiga (IEC kood: LR03). Asendage patareid, kui vibratsioon muutub nõrgaks või peatub (~20 tundi kasutamist). Seade on sertifitseeritud 3 patareivahetuse jaoks. Asendage alati mõlemad patareid korraga ja ärge segage uusi ja kasutatud patareisid või eri markide ja tüüpe patareisid. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage patareid lekkimise ja patareide tühjenemise vältimiseks.

Patareide vahetamine:

Alustage, kui seade on välja lülitatud. AAA-patareide vahetamiseks keerake ristpeakruvikeerajaga lahti ja avage tagapaneel ning asetage uued patareid õige polaarusega (+/-), nagu on näidatud seadmel. Pange tagapaneel tagasi ja keerake kruvid kinni.

Märkus. Ärge pingutage kruvisid üle.

Buzzy® Personal sisaldab:

Buzzy® Personali komplektid sisaldavad M-Stim®-i mootoriüksust (vastupidav terapeutiline vibratsioonimootoriga seade) käsitsi väljalülitamise lülitiga (paigaldatud 2 AAA-patareid), kaht jahutuspakki, üht vabakäerihma ja juhendit. Kõik tarvikud on lateksivabad ja korduskasutatavad. Jahutuspakid ja rihood on isiklikud tarbeasjad, mis on ette nähtud kasutamiseks ühele kasutajale.

Garantii:


Kui Te ei ole täiesti rahul, tagastage toode 30 päeva jooksul ostukohta täielikuks tagasimakseks või võtke ühendust aadressil Support@PainCareLabs.com. Lisateavet tagastamisprotsessi kohta leiate aadressilt PainCareLabs.com/Warranty-and>Returns/.

Hoiatused:


- Kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Otsene või pikaajaline jää pealekandmine võib põhjustada vasokonstriksiooni.

Garantii:

Ettevõtte katab kõik toote mootoriüksuse rikked või defektid, mis ilmnevad normaalse kasutamise käigus 6 kuu jooksul või 3 patareivahetus ajal, olenevalt sellest, kumb saabub esimesena. Pehmete tarvikute ja jahutuspakkide garantii kestab 1 aasta ostukuupäevast. Ettevõtte asendab toote või tagastab ostu ning jätab endale õiguse uuendada või asendada osi uusimate tooteversioonidega. Buzzy Personali seadmel on silikoonrihm tiibade kinnitamiseks. Rihma katkemine mitte-Buzzy brändi jahutuspakkide kasutamise, jahutuspakkide vale paigutuse, hooletu käsitsemise või toote väärkasutuse tõttu ei ole garantiiga kaetud. Tühjade patareidega ja/või tagastatud seadmed, mis kontrollimise käigus töötavad, ei kujuta endast riket ega kuulu garantiiga kaetuse alla. Kulunud kruvidega seadmed ei ole garantiiga kaetud. Garantiiga katmata tagastatud seadmed võidakse tagastada kliendi kulul. Tervishoiusüsteemid, mis ostavad Buzzy Personali komplekte kliiniliseks kasutuseks, tühistavad asutuse mis tahes garantii. See garantii annab teile konkreetseid seaduslikud õigused ja teil võib olla ka muid õigusi, mis varieeruvad olenevalt osariigist.

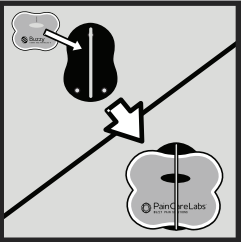

Kinnitage tiivad Buzzy® Personali tagaküljele.

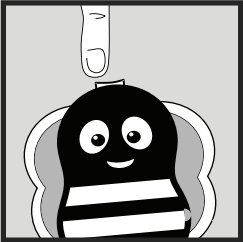

Lülitage aktiveerimiseks lüliti sisse.

ON

OFF

Sümbolid ja ikoonid:



Üks patsient, mitu kasutust



Hoidke päikesevalgusest eemal



Hoidke kuivana



Temperatuuri ülem- ja alampiir



Niiskuse ülem- ja alampiir



Rõhu ülem- ja alampiir



Euroopa vastavus



Eemaldage enne utiliseerimist patareid



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE)



Tutvuge kasutusjuhendiga enne kasutamist



Tõlked



Hoiatus



Tootja



Tootmisriik



Tootmiskuupäev

LOT

Partiinumber

UDI

Kordumatu identifitseerimistunnus

MD

Meditisiiniseade

EU REP

Euroopa Liidu esindaja

FCC

Vastab FCC standarditele

B-tüüpi rakendusosa

 Patareide utiliseerimine:

Eemaldage enne seadme utiliseerimist patareid. Utiliseerige patareid eraldi olmejäätmetest vastavalt kohalikele ringlussevõtu- ja keskkonnanõuetele leelispatareide (LR03) kohta. Järgige seadme utiliseerimiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetele (WEEE) kohaldatavaid juhiseid. Ärge põletage patareisid ega seadet.

 Patareide ohutus:

- Kasutage ainult AAA-leelispatareisid (LR03).
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
- Ärge lühistage, purustage, torgake läbi ega võtke lahti patareisid ega laske neil kokku puutuda kuumuse, tule või veega.
- Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Asetage patareisektsiooni kate enne seadme uuesti kasutamist kindlalt tagasi.

Kasutusnäidustused:

Buzzy® on ette nähtud nõelprotseduuridega (nt süstid, venoosne juurdepääs, kanüülimine, verevõtud, vere annetamine, dialüüs, kosmeetilised ja hambaarstlikud süstid) seotud valu leevendamiseks ning väiksemate vigastuste (lihase- või kõõlusevalud, killud, mesilase nõelamine) ajutiseks leevendamiseks. Jahutuspakkidega kasutamine on lubatud alates 1. eluaastast.

 Vastunäidustused:

Ärge kasutage seletamatu säärevalu korral. Pöörduge arsti poole. • Seda seadet ei tohi kasutada turses või põletikus piirkondades ega nahalöövete korral. • Ärge asetage otse termilise põletuse peale. • Ärge kasutage jahutuspakki, kui esineb tundlikkus jää või külma suhtes (nt sirprakuline aneemia, Raynaud' tõbi).

 Ettevaatusabinõud:

Hoidke jahutuspakke jahedas ja kuivas kohas. • Jahutuspakid peavad parima mõju saavutamiseks olema tahkelt külmunud. • Ärge kasutage jahutuspakkide külmutamiseks kuivjääd, välja arvatud tervishoiutootja järelevalve all. • Ärge torgake jahutuspaki kambreid läbi. • Visake ära lekkimise korral. • Ärge neelake geeli alla. • Hoidke lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. • Ärge kasutage neuropaatia või jäätundlikkuse korral.

Tõrkeotsing:

Intensiivse kasutuse või äärmuslike temperatuurikõikumiste korral võib osutada vajalikuks patareide sagedasem vahetamine. Kui seade lakkab töötamast või mehaaniline stimulatsioon on nõrk, vahetage patareid välja. Asetage uued patareid õige polaarusega(+/-), nagu on näidatud seadmel.


Hooldus:

Kontrollige kogu seadet kahjustuste (nt pragude) nähtavate märkide suhtes. Veenduge, et lüliti liiguks vabalt. Veenduge, et välised kruvid oleksid kindlalt kinni. Pühkige kõiki välispindu õrnalt pehme lapiga, mis on niisutatud õrnatoimelise seebilahusega. Desinfitseerimiseks pühkige kõiki välispindu alkoholi või haiglaklassiga desinfitseerimislapiga. Kloorheksidiin võib aja jooksul plasti kahjustada. Soovitav on PDI Sani-Clothi detergentlapid (kollase kaanega). Ideaalis laske seadmel enne kasutamist õhu käes kuivada. Tiibade läbipaistvat külge saab samuti alkoholi või tamponiga pühkida. Laske õhu käes kuivada. Ärge autoklaaviage ega kastke vette. See seade ei vaja kasutamiseks steriliseerimist.

Buzzy® paigutus:



Süstide korral

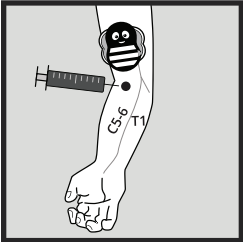

IV või flebotoomia korral

Kui jäätivad on paigas, aktiveerige vibratsioon.

Buzzy® Personal leevendab valu kokkupuutel:

Asetage otse vigastusele või „aju ja valu vahele“ nõelprotseduuride korral.

Süstide korral:

Intramuskulaarsete deltalihasesüstide korral vajutage kaenlaaluse piirkonna vastu (õla ja kaenla vahel), kus punkt on suunatud õla poole. Teiste süstide korral asetage Buzzy® otse süstikohale 30–60 sekundiks. Liigutage Buzzy®-t pea või selgroo suunas (proksimaalselt). Süstige, kui punkt on süstikoha lähedal.

IV või flebotoomia korral:

Aktiveerige vibratsioonilüliti. Hoidke, kinnitage rihma abil või asetage Buzzy Personal žguti alla 2–3 cm juurdepääsukoha kohale (proksimaalselt). Ärge asetage otse juurdepääsukohale. Puhastage koht ja alustage protseduuri viivitamatult. Valikuline: lükake žgutt läbi Buzzy® Personali pilu, et kinnitada Buzzy® Personal kaele.

Seadme tagastamine:

Ostja peab võtma ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga riigis, kus seade osteti, tagastamisjuhtnõrde saamiseks.

Tellimine/lisateave:

Külastage meie veebisaiti PainCareLabs.com KKK täieliku loendi, muude valuleevenduse nõuannete, õpetusvideote, tarvikute ja varuosade saamiseks.

 ÄRGE TEHKE HOOLDUST KASUTAMISE AJAL

USA patent. Briti patent nr 2455695
RM-1910, 1248-064-5002-00, 1248-064-5001-00

 Kui märkate patareidest lekkimist, korrosiooni või lõhna:

1. Ärge puudutage lekkinud materjali paljaste kätega.
2. Kasutage kaitsekindaid ja pühkige sektsiooni kuiva lapiga.
3. Utiliseerige patareid kohe vastavalt kohalikele nõuetele.
4. Kui lekkinud materjal puutub kokku naha või silmadega, loputage hoolikalt veega ja pöörduge arsti poole, kui ärritus püsib.

 Kontrollige kahjustusi enne uute patareide sisestamist. Kui korrosioon püsib või seade ei tööta korralikult, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditoeaga.